VAIHEITTAISET KÄYTTÖOHJEET

PENIMASTER PRO TANKOJÄRJESTELMÄ

PENIMASTER PRO

VAIHEITTAISET KÄYTTÖOHJEET

PENIMASTER PRO VYÖJÄRJESTELMÄ



Sulje kiertoventtiili kiertämällä sitä vastapäivään.



Levitä terskaan 3–4 tippaa Pro-Master-nestettä.



Levitä lateksikalvon sisäpinnalle 3–4 tippaa Pro-Master-nestettä.



Purista pumppupallo lähes tyhjäksi. Kiinnitä puristettu pallo suljettuun kiertoventtiiliin niin, että muoviosan merkinnät ovat ylöspäin.



Kierrä terskakammiota ja pumppupalloa vastakkain. Purista pumppupallo pohjaan ja paina terska kevyesti kammiota vastaan.



Vapauta ote hitaasti. Syntyvä kevyt alipaine vetää terskan kammioon. **VINKKI:** Jos terska ei siirry kokonaan kammioon, jatka vaiheeseen 7 ja toista vaiheet 4 ja 6.



Irrota pumppupallo kiertämällä sitä vastapäivään. Pidä venttiili suljettuna.



Kokoa tankovenytin. Arvioi sopiva pituus: venytetyn peniksen pituus + 1,5 cm.



Aseta terskakammioon kiinnitetty penis tankovenyttimeen.




Paina tangot paikoilleen. Venytä penistä varovasti ja kiinnitä liitososan kapea kohta liittimeen. Seuraa vetovoimaa jousivaa'asta. Lyhyemmät tangot vähentävät vetoa; pidemmät tangot tai kierresäätö lisäävät sitä. Yksi asteikkoväli vastaa noin 230 grammaa.

VENYTIN.FI

PENIMASTER PRO • PIKAOHJE

MSP CONCEPT • BERLIN, SAKSA
Emser Straße 39d, 10719 Berlin
www.penimaster.de • info@penimaster.de
Puh. +49 (0)30 23 63 85 64
Faksi +49 (0)30 21 75 26 11

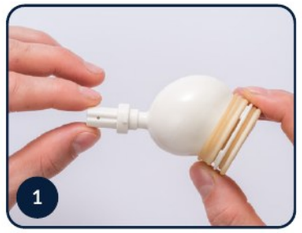

Sulje kiertoventtiili vastapäivään. **Kalvokoot:** vihreä – pieni, keltainen – keskikokoinen, sininen – suuri terska.



Levitä terskaan 3–4 tippaa Pro-Master-nestettä.



Levitä lateksikalvon sisäpinnalle 3–4 tippaa Pro-Master-nestettä.



Purista pumppupallo lähes tyhjäksi. Kiinnitä puristettu pumppupallo suljettuun kiertoventtiiliin merkinnät ylöspäin.



Kierrä terskakammiota ja pumppupalloa vastakkain. Purista pumppupallo pohjaan ja paina terska kevyesti kammiota vasten.



Vapauta ote hitaasti. Alipaine vetää terskan kammioon. **VINKKI:** Jos terska ei siirry kokonaan kammioon, jatka vaiheeseen 7 ja toista vaiheet 4 ja 6.



Irrota pumppupallo kiertämällä vastapäivään. Pidä venttiili suljettuna.



Säädä vyön pituus vartalollesi. Pidentäminen vähentää vetoa, lyhentäminen lisää sitä.



Kiinnitä liitososan kapea kohta liittimeen ja vedä vyö paikoilleen.



Lantiolla: suuntaa penis vasemmalle tai oikealle lantiota kohti.




Kierrä vyö selän kautta reiden ympäri. Kiinnitä klipsi renkaaseen tai suoraan vyöhön.

TAI



Olkapäällä: suuntaa penis ylöspäin ja vie vyö olkapään yli.

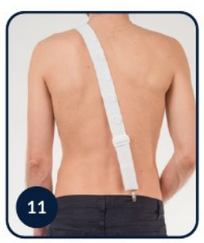

Vie vyö ristiin selän yli. Kiinnitä klipsi housuihin.

TAI



Polven kautta: istu tuolille ja kierrä vyö polven ympäri.



Kierrä vyön vapaa pää penikseen liitetyn vyöosan ympäri.



Kiinnitä vyö klipsillä renkaaseen.